



READY-HEAT™ COUVERTURE CHAUFFANTE

améliorez le confort de vos patients afin de leur garantir des soins de meilleure qualité et une récupération plus rapide



APERÇU

Une solution de réchauffement des patients totalement mobile qui ne quitte pas le patient, de son transport vers les urgences et jusqu'au bloc opératoire et à la salle de réveil.

- se réchauffe automatiquement (réaction de type aérobie) et atteint sa température de fonctionnement (40° C) au bout de 15 à 20 minutes sans nécessiter de source d'alimentation
- reste à température pendant un maximum de 6 heures
- léger
- sans bruit
- économique
- une boîte contient 10 couvertures
- 1 mode d'emploi par boîte*

POUR DES SOINS DE MEILLEURE QUALITÉ ET UNE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE

La couverture auto- chauffante Ready-Heat est un dispositif intégral, à usage unique permettant de maintenir la température du patient et de prévenir ou de corriger une hypothermie dès que cela s'avère nécessaire en milieu hospitalier, de son admission à l'hôpital à son entrée au bloc opératoire, de la salle de réveil à l'USI ainsi que dans le cadre d'un transport en urgence et en service d'urgence.*

L'activation de la chaleur s'enclenchera dès que l'emballage sera ouvert et que la couverture sera exposée à l'air, ne nécessitant ainsi aucune source d'alimentation et évitant ainsi tout gaspillage d'électricité et le recours à d'autres équipements. 15 à 20 minutes suffisent pour atteindre une

température de fonctionnement de 40° C. Celle-ci est maintenue pendant 6 heures. La température maximale est de 43° C.


Cette solution de réchauffement totalement mobile, est une manière très économique de maintenir chaque patient au chaud, de prévenir l'hypothermie parfois induite par l'anesthésie et d'améliorer le confort du patient ainsi que la qualité des soins. Cette couverture légère peut être utilisée dans l'ensemble de l'établissement hospitalier, pour le transport des patients et pour accélérer la récupération.

La couverture Ready-Heat est déjà bien connue pour son utilisation dans les situations d'urgence.

** Afin de garantir une surveillance et un traitement adéquats dans le cadre de la gestion de la température de votre patient, nous nous reportons notamment aux Directives Cliniques NICE (National Institute for Clinical Excellence) (www.nice.org.uk) relatives à l'hypothermie périopératoire involontaire, (2008) et aux Directives Cliniques de la SIAARTI (société italienne de l'anesthésie, analgésie, réanimation et soins intensifs) relatives à l'intubation difficile et à la gestion difficile des voies respiratoires, (1998).*

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

READY-HEAT

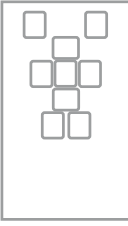PRODUIT	RÉF.	TAILLE	TEMPÉRATURE DE RÉCHAUFFEMENT	POIDS	MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE
couverture dotée de 9 zones 	SB9RH9120	86 cm x 152 cm 34 pouces x 60 pouces	40° C / 104° F en 15 min.	450 g	jusqu'à 6 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cette couverture est fabriquée à partir d'un tissu synthétique non-tissé obtenu par filage direct, de qualité médicale, à usage unique et dont la couleur résiste à l'eau. Elle se compose de 9 zones thermiques solidement fixées à l'intérieur de poches scellées à l'aide d'un procédé de soudure par radio-fréquence breveté.

Remarque : La couverture ne doit pas être placée directement sur la peau exposée. Un champ textile doit être placé sur le corps du patient.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de notre produit, veuillez vous reporter au mode d'emploi inclus dans chaque boîte.

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage.

Dispositif médical de classe IIa. Organisme notifié : Intertek UK, CE 0473.

Fabricant du dispositif : TechTrade LCC, USA.

DISTRIBUÉ PAR :

TELEFLEX SIÈGE SOCIAL, IRLANDE - Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath
Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

FRANCE Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com

BELGIQUE Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com

SUISSE Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 06 41 · 00 00 02 · REV A · 05 13 02 · Toutes les informations communiquées dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Elles peuvent faire l'objet de modification technique sans préavis.



①

Au moment d'utiliser la couverture, retirez-la de son emballage protecteur extérieur (mais pas avant car son activation s'enclenchera immédiatement).




②

Placez la couverture sur le patient, comme indiqué par les autocollants.



③

Ne pas plier la couverture sur le patient.

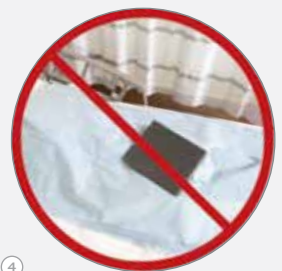

④

Ne rien poser sur la couverture.

LES INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA COUVERTURE READY HEAT NE DOIVENT PAS DISPENSER D'UNE LECTURE ATTENTIVE DU MODE D'EMPLOI.

Teleflex